

Guincho para cadeiras de rodas ou scooters com peso inferior a 90 KG



Prático

O Carolift 90 eleva uma carga máxima de 90 Kg. A subida, a descida e a rotação fazem-se por intermédio de um comando eléctrico.

O braço do guincho está revestido com um tecido esponjoso, o que o torna agradável ao tacto, especialmente quando a temperatura está muito alta ou muito baixa.

O Carolift 90 ocupa pouco espaço na bagageira e quando está recolhido não interfere com a visibilidade traseira.


Por razões de segurança o guincho deve ser baixado quando não está a ser utilizado.



O guincho recolhido na bagageira.

Ajustável à dimensão do seu automóvel

O Carolift 90 pode ser encurtado para se adaptar às dimensões do seu automóvel.

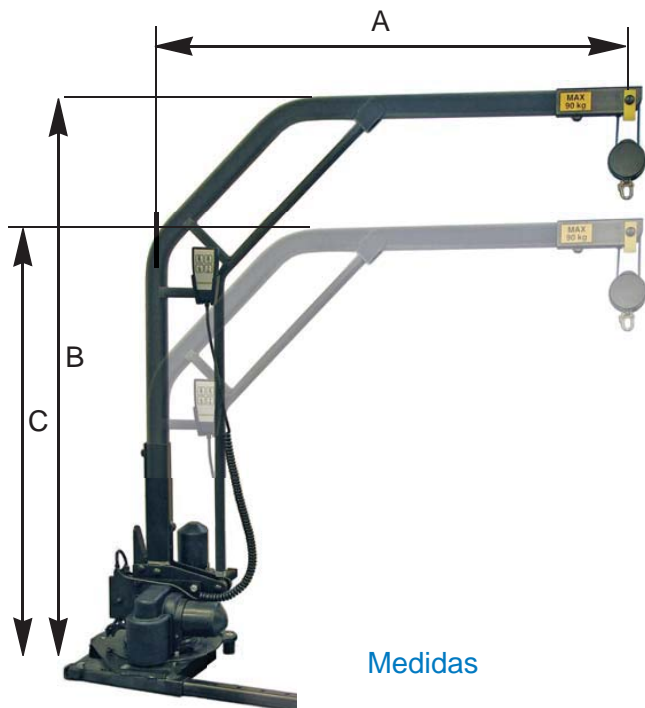

refª. AMA-09



Tubagem revestida com tecidos.




O guincho rodado no interior da bagageira.

Medidas

- A = Entre o ponto de rotação e o dispositivo de elevação.....830mm
- B = Entre o guincho e o pavimento do automóvel.....1050mm máx.
- C = Entre o guincho e o pavimento do automóvel.....810mm mín.

Outras especificações

- Peso, incluindo a base de fixação.....15Kg
- Tensão.....12v CC
- Intensidade da corrente à carga máxima.....< a 10 Amp

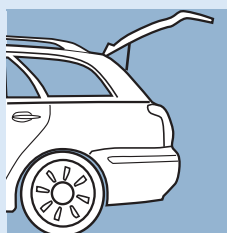


Carrinhas ou stations

SUBIR / DESCER	↕	ELÉCTRICO
ROTAÇÃO INTERIOR / EXTERIOR	↻	ELÉCTRICA

Exemplos de equipamentos que podem ser carregados com o Carony 90:




Cadeira de rodas manual rígida

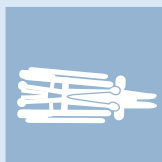

Cadeira de rodas manual dobrável



Cadeira de rodas eléctrica com peso máximo de 90 Kg

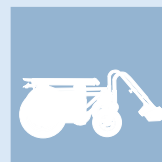

Chassis do Carony Go



Compatibilidade Electromagnética



Teste de colisão



Certificado CE



Max. 90 Kg